

サラヤ針捨て BOX 1.4L 取扱説明書

2024 年 3 月 第 1 版

① フタの取り付けについて

- イ) 写真 1 のようにフタのツメ 4 か所と本体の角 4 か所を合わせるようにセットします。
その際、本体はラベルを貼り付けている面を正面にして、フタは仮フタロック用のツメがある方を正面に、組み立ててください。
- ロ) フタのツメを本体の角に 1 か所ずつ、はめ込みます。

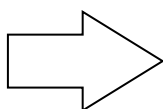


写真 1

② フタのはめ込み方法

- イ) 写真 2 のように、1 か所から順に、はめ込みます。
- ロ) はめ込む際、両手でフタを押さえ、本体の縁を握るように力を加えて確実に押し込みます。



写真 2

③ はめ込みが終われば、残りのツメも同じ要領で行ってください。

④ 最後に、全てのツメがしっかりと本体にはまっているか、ご確認のうえご使用ください。

※ 安全にご使用いただくために針捨て BOX をご使用にならない際は、仮フタは極力閉めてご使用ください。

※ 廃棄の際は、完全ロック用のツメ（黒丸部分）を折り曲げ、完全ロック用の溝に差込み、確実に封がされていることをご確認のうえ、医療廃棄物として BOX ごと廃棄してください（写真 3）。

※耐荷重：1.0kg



写真 3

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

TEL.06-4706-3938（受付時間：平日 9:00～18:00）