



起立補助器

Sara® Stedy Compact

サラステディ コンパクト

Sara® Stedy Compactは、自身で日常的活動を行えるが、ある程度の介助が必要な利用者に対し、立ち上がり動作と立位保持をサポートします。



安全な 一人介助が可能

電動機能がないため、簡単な操作で利用者の移乗サポートができます。抱え上げ介助が不要で、介助者の身体的・精神的負担を軽減し、腰痛予防にもつながります。

安定した 座位姿勢の維持

旋回式はね上げピボットシートは、立ち上がる時に開くことができ、移乗時には閉じて座ることができます。膝サポートは、膝の安定性が低下した利用者も快適で安定した座位姿勢を維持することができます。

早期離床を促進

座位から立位移乗の際に、利用者自身の参加を積極的に促すことで、早期離床をサポートします。日常的に立位姿勢をとる機会が増えることで、身体機能の維持や拘縮予防につながります。

介助者の
負担軽減



旋回式はね上げ
ピボットシート

膝サポート



利用者の
ADL維持



身長:138~172cm
 体重:182kgまで
 の利用者が対象

クロスバーハンドル

ハンドルに掴まって、利用者が自分の体重を支えることができます。

膝サポート

膝パッドは立位時や移乗時に利用者の脚を支えます。

旋回式はね上げピボットシート

利用者が立ち上がる時に開くことができ、移乗時には閉じて座ることができます。

シートハンドグリップ

介助者が簡単にシートを旋回させることができます。

ペダル式シャーシレッグ


幅の広い椅子などにも、レッグ部を開いて簡単に近づく事ができます。



製品情報

最大安全耐荷重	182kg
機器重量	28.3kg
保管寸法(高さ)	960mm
閉脚時外寸(幅)	490mm
全開脚時外寸(幅)	880mm
閉脚時内寸(幅)	360mm
全開脚時内寸(幅)	750mm
レッグクリアランス(床面から脚の頂部)	100mm
シャーシクリアランス(床面からシャーシ底部)	30mm
機器全長	890mm
回転半径	1,020mm

スペース要件

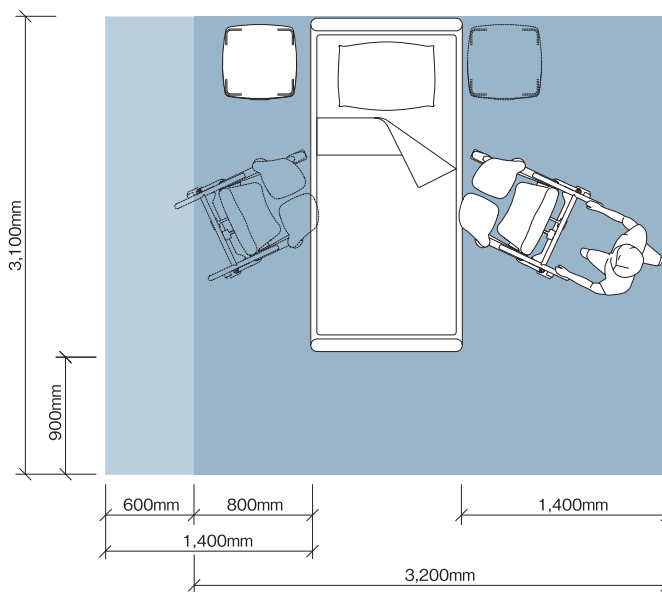

- 青色のエリアは、ベッドの片側から補助器を人間工学的に使用できる必要最低限の作業領域を示します。
- 水色のエリアは、ベッドの両側から利用者、補助器、介助者が容易にアクセスするために必要な拡張作業エリアを示します。



Sara® Stedy

身長149~193cm、体重182kgまでの利用者に対応したサイズもあります。

※詳細は担当営業にお問い合わせください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	規格番号
起立補助器 サラステディコンパクト	本体	1	78662	NTB3000-JP

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>