



サラヤ プラスチック手袋



PLASTIC DISPOSABLE GLOVES

Personal Protective Equipment

- 耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
- 左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
- 手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。

※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

一般医療機器 届出番号 27B1X00120000700
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
医療機器クラス分類 クラス I

耐久性があり、手にぴったりフィット



パウダーフリー/100枚入
サイズ / XS・S・M・L・XL

様々なシーンでお使いいただけます。
(医療・介護など)

わかりやすいパッケージデザインで現場をフォロー

▼忙しい現場でも一目で中身を認識できます。




▲(設置例)PPE 専用ホルダー(別売)
PPE 専用ホルダーには樹脂製もあります。(別売)▶

着脱方法

着け方

外し方

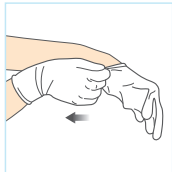


① 手首の部分をつかんで装着する



① 片方の手袋の袖口をつかむ




② 手袋を裏表逆になるように外す

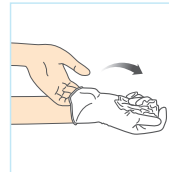

③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む



④ 裏表逆になるように外す

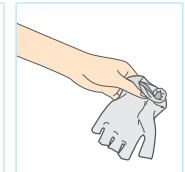

⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

手袋サイズ早見表

この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します

※製品により多少誤差の出る場合があります。

手袋サイズ表

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長(mm)	240				
掌幅(mm)±5mm	75	85	95	105	115

仕様

【材質】塩化ビニル樹脂(PVC)
【サイズ】XS・S・M・L・XL
【タイプ】パウダーフリー 左右兼用
【カラー】クリア

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	JANコード
サラヤ プラスチック手袋粉無	100枚 / XS	10	53497	49-87696-53497-1
	100枚 / S		53498	49-87696-53498-8
	100枚 / M		53499	49-87696-53499-5
	100枚 / L		53500	49-87696-53500-8
	100枚 / XL		53504	49-87696-53504-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)