



シャワートロリー

Carevo®

カレボ



3Dで
見てみよう! >>>

SCAN ME



スマートフォンの
カメラでQRコードを
読み取ってください

Carevo®は、寝たきりに近い状態の利用者に
快適なシャワー浴を提供できる製品です。
利用者に近い位置でのシャワー介助が可能で
介助者の身体的負担を軽減します。

フレキシ
ゾーン



利用者の快適性を 追求した設計


柔らかい表面素材と特許取得のフレキシゾーン(臀部周辺の床面が沈み込む設計)は、利用者の床ずれのリスクを軽減し、ケアの質を向上させます。体格の大きい利用者でも、身体に負担をかけずに体位変換を行うことができます。

快適な姿勢で 介助が可能

高さ調整機能と特許取得のエルゴアクセス・エリアによって、利用者に近い位置で快適な介助姿勢を保つことができるため、介助者の身体的負担を軽減します*。

*出典:Knibbe NE,Knibbe JJ & Waaijer E(2013)

エルゴ
アクセス
・エリア

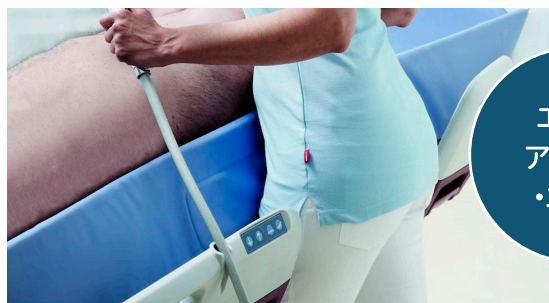

簡単な
マットレス
着脱



メンテナンスが簡単

サビやカビが発生しづらい素材を使用しているため、衛生的です。マットレス部分だけの取り外し、交換が可能で、簡単に洗浄・除菌ができ、感染対策にも配慮しています。

利用者+水の重量
200kgまで

持ち手ハンドル

利用者自身が積極的に体位変換に参加することができます。

フレキシゾーン

利用者の身体にフィットする、快適な設計です。

柔らかいヘッドピロー

電動式の背上げ機能

背角度が15度まで上がるため、お湯を溜めた際に耳や鼻に水が入ることを防止します。

エルゴアクセス・エリア

利用者に近い位置で介助ができます。

使いやすい操作パネル

介助場所を選ばず、3方向からコントロールパネルへアクセスできます。

電動式の高さ調整機能

可動範囲：35cm

4つのキャスター全てにブレーキ付き

シャワーハンドルホルダー

柔らかく交換可能なマットレス

マットレス着脱が簡単で、洗浄・消毒が容易にできます。

排水ホース

移動時には上方へ向けて固定することができます。



製品情報

安全耐荷重 (SWL) 利用者 + 水	200kg
利用者の最大体重	182kg
重量 (マットレス含む)	82kg
全長	2,005mm
全幅 (ストレッチャー)	586mm
全内幅 (サイドサポート含む)	759mm~888mm
床面からストレッチャーまでの高さ	605mm~955mm

付属品



バッテリー／2個



充電器／1個

別売オプション品 ※詳細は担当営業にお問い合わせください。


アルジョ スライドシート

併用することで、ベッド上での利用者の体位変換や水平移乗をサポートするスライディングシートです。洗濯可能。

1枚のサイズ：
730×1,730mm (標準サイズ：紫)



スペース要件

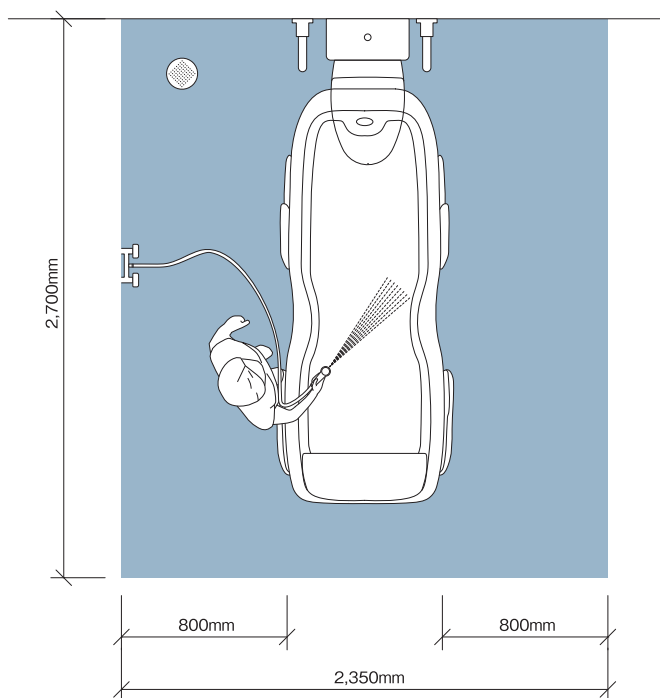

● 青色のエリアは、利用者、機器、介助者に十分なアクセスを提供しながら、衛生管理と移乗を円滑に行うために必要な作業スペースを示します。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	規格番号
シャワートロリー カレボ	本体	1	78660	BAC1117-01
アルジョ スライドシート標準サイズ	2枚入	1	78664	NSA2000
カレボ用枕	1個	1	78666	8663465-017

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)