



医療用

SARAYA Personal Protective Equipment

サラヤサージカルマスクF・S

Surgical Mask

医療用マスク
米国規格ASTM
F2100-19/20に適合



細菌・微粒子バリア

液体バリア

湿性生体物質による汚染から医療従事者と患者を守ります。

標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りを受ける可能性が高い処置や患者ケアを行う場合、医療従事者自身と患者それぞれを感染性病原体から保護するため、個人防護具(PPE)を着用することが求められています。サージカルマスクには細菌・微粒子、液体に対するバリア性が求められます。

ホワイト
ベーシックな
白色マスク



ピンク
目を引く
存在感の
あるピンク



パウダー
ピンク
顔を明るく
見せるピンク



パステル
パープル
すっきりとした
印象の上品な
パープル



使用感の良さも、マスクを選ぶ重要ポイントです。

ノーズピース内蔵

顔の形にあわせて変形することができ、すき間をつくりません。

息苦しさがなく肌触りのよい不織布



ラテックスフリー

アレルギーに配慮したラテックスフリーの素材を使用しています。

丈夫でソフトなイヤーストラップ

耳が痛くなりにくいソフトな丸ゴムを使用しています。

超音波溶着法でマスクとイヤーストラップを一体化

米国規格ASTM F2100-19/20に適合した医療用マスクです。

細菌濾過効率：BFE (%) ≥ 98

微粒子濾過効率：PFE (%) ≥ 98

高性能フィルター内蔵による高い濾過効率

血液不浸透性：(mmHg) 80

体液・血液などの湿性生体物質から口や鼻を守る液体バリア性

呼吸抵抗： ΔP (mmH₂O/cm²) <5

息苦しさのない適度な呼吸抵抗値

延焼性 CLASS1

火気に対する安全性(燃え広がりにくさ)

※保管期間、保管状態により経時変化いたします。

不織布3層構造で、細菌・微粒子バリア性と液体バリア性に優れています。

外側・内側(スパンボンド不織布)


軽くて強度がある不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の湿性生体物質や細菌・微粒子の侵入を防ぎます。顔に触れても毛羽立たないすべすべした肌触りです。

フィルター(メルトブロー不織布)

軽くてフィルター性能の高い極細繊維を使用しています。

素材：ポリプロピレン不織布(本体、フィルター)
ポリエステル(イヤーストラップ)
ポリエチレン(ノーズピース)

サイズ(フリーサイズ)：W175mm×H95mm
(Sサイズ)：W145mm×H95mm

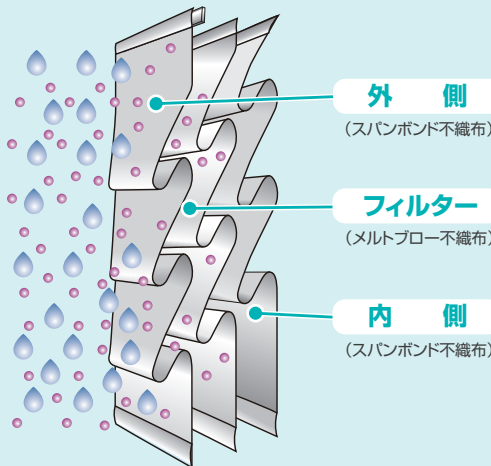

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤサージカルマスクF50枚ホワイト	50枚入 / フリーサイズ	20	51118	49-87696-51118-7
サラヤサージカルマスクS50枚ホワイト	50枚入 / Sサイズ	20	50974	49-87696-50974-0
サラヤサージカルマスクF50枚ピンク	50枚入 / フリーサイズ	20	51116	49-87696-51116-3
サラヤサージカルマスクS50枚ピンク	50枚入 / Sサイズ	10	51117	49-87696-51117-0
サラヤサージカルマスクF50枚パウダーピンク	50枚入 / フリーサイズ	20	50921	49-87696-50921-4
サラヤサージカルマスクS50枚パウダーピンク	50枚入 / Sサイズ	20	50923	49-87696-50923-8
サラヤサージカルマスクF50枚パステルパープル	50枚入 / フリーサイズ	20	50922	49-87696-50922-1
サラヤサージカルマスクS50枚パステルパープル	50枚入 / Sサイズ	20	50924	49-87696-50924-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2026年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)