

多くの人を訪れる場所により快適な手指消毒を



自動手指消毒器

PHD-L01 WHITE

多くの方がご利用される場所での使用に適した大容量タイプ
液垂れ防止ブースで消毒液の飛散を防止

大容量ボトルを設置可能で、手指消毒剤の交換回数を低減



手指消毒剤

指定医薬部外品

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラVH

原液 液状 火気厳禁

有効成分エタノール76.9~81.4v/v%を含有し、ノンエンベロープウイルスを含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。

ノズル付



商品コード 42430

指定医薬部外品

手指消毒用アルコール
アルベット 手指消毒用 α

原液 液状 火気厳禁

有効成分エタノール76.9~81.4v/v%を含有し、ノンエンベロープウイルスを含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。成分はすべて食品添加物で、食品を取り扱う現場でも安心してお使いいただけます。



商品コード 41238

指定医薬部外品

速乾性手指消毒剤
ヒビスコールSH

原液 液状 火気厳禁

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%を含有し、使用後も消毒持続効果を発揮します。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。

カップ&ノズル付



商品コード 42308

第2類医薬品

速乾性手指消毒剤
ヒビスコールS

原液 液状 火気厳禁


有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.2w/v%を含有し、使用後も消毒持続効果を発揮します。保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。

カップ&ノズル付



商品コード 41700

仕様	
項目	内容
名称	自動手指消毒器
型式	PHD-L01
外形寸法	W550×D441×H1,605 mm
製品質量	28kg (梱包、付属品、梱包部品、使用液は除く)
材質	本体、上背板、廃液用タンクホルダー：電気亜鉛めっき鋼板 ブース、ノズルカバー、トレー、コネクタケース：PP ストロー：ステンレス (SUS304) 廃液用タンク：PE
電源	定格電圧 (周波数) : AC100V (50/60Hz共用) 電源コード長さ約1.6m
消費電力	待機時：1W 作動時：5W
使用環境温度	5~40℃ (使用液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
噴射量	1.5mL
使用液	当社指定の使用液

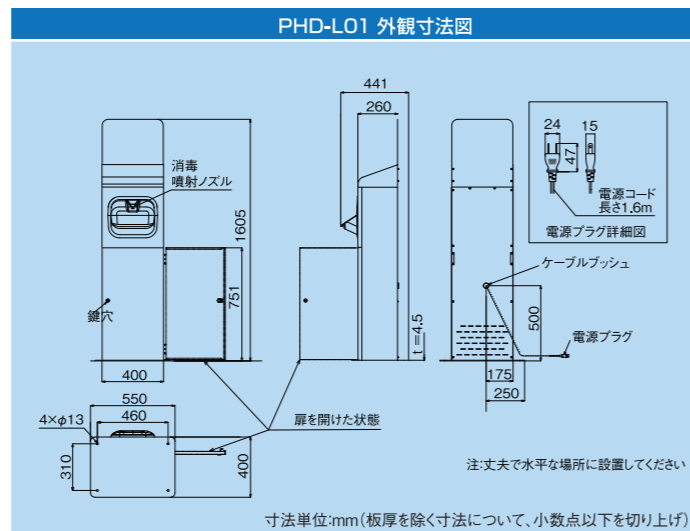

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
自動手指消毒器PHD-L01 ホワイト	本体	1	41659	49-87696-41659-8
ウィル・ステラVH	5L	3	42430	49-87696-42430-2
アルベット 手指消毒用 α	5L	3	41238	49-87696-41238-5
ヒビスコールSH	5L	3	42308	49-87696-42308-4
ヒビスコールS	5L	3	41700	49-87696-41700-9

安全にご使用いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外の使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。 ■ 記載内容は2025年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~17:00)

高頻度の利用にも対応できる、 自動手指消毒器

5Lの手指消毒剤を2本格納でき、5Lで約3,300回ご使用いただけます。

また、周辺への液垂れや飛散を防止するブースタイプを採用。

多くの方が利用される場所でも、管理しやすい

自動手指消毒器です。



使用液飛散防止!
ブースタイプにより、
使用時の液飛散を抑え、
周辺の床を汚しません。



大きなアナウンスパネル
日本語、英語を併記しイラストで
わかりやすく手指消毒を案内。

**側面からでも
用途を確認できる**
両サイドに手指の消毒と表記。



親切設計のブース内トレー
手を横ったトレーで手の入り
口を案内。トレーは取り外し
て洗うことができます。



使用サポートランプ
ブース内のLEDランプが常時点灯し、
手元が明るく安心です。



使用液交換お知らせ機能
ブース前面の赤ランプ点滅
で液切れをお知らせします。



大容量の消毒剤を設置
5Lの消毒剤を2本格納できるので
入れ替え回数を抑えられます。



ロック機能
本体扉はカギ付き。盗難や
いたずらを防止します。



廃液タンク
トレー下に廃液用タンクを
装備。消毒器を清潔に
保ちます。