

医用電子血圧計

MIST-1000

モード設定で圧力・時間を
調節できる血圧計です。



商品コード 45300

卓上型 W216 × D127 × H67mm

※腕帯Mサイズ、ACアダプター付

MIST-1000 特徴

- 特徴 ① ワンタッチ全自動で血圧測定できます。
収縮期血圧・拡張期血圧・脈拍・平均血圧の測定ができます。また通常の血圧測定のほかにも「マイモード」機能があり、設定した圧力・時間で加圧することもできます。
- 特徴 ② 被験者に負担をかけません。
加圧しながらの血圧測定ですので、最高血圧を認識後はそれ以上圧力をあげません。必要以上に圧を加えないので被験者に負担をかけません。
- 特徴 ③ 血圧測定データを保存できます。
血圧計本体内に3件までの血圧測定履歴を保存できます。
付属のUSBケーブルを使えばパソコン内にも保存*が可能です。
*データ管理ソフト(別売オプション)が必要です。



SARAYA

MIST-1000 別売オプション

血圧計データ収集ソフト

商品コード 45301

データ管理ソフト。血圧計で測定したデータをパソコンで管理できます。



MIST-1000用 腕帯Sサイズ

商品コード 45304

Sサイズの腕帯です。汚れたりした時など交換が必要な時にご利用ください。

(適用腕周範囲19cm~27cm)



MIST-1000用 腕帯Mサイズ

商品コード 45305

Mサイズの腕帯です。汚れたりした時など交換が必要な時にご利用ください。




(適用腕周範囲21cm~30cm)



仕 様	
項 目	内 容
名 称	医用電子血圧計
型 式	MIST-1000
外 形 寸 法	W216×D127×H67mm
製 品 質 量	約525g(電池を含まない)
血 圧 測 定 方 式	オシロメトリック法
デジタル圧力表示	0~270mmHg
電 源	アルカリ乾電池(単3×4本)*/専用ACアダプター
電 撃 保 護	内部電源機器/専用ACアダプター使用時クラスⅡ機器
圧 力 誤 差	±3mmHg
測 定 範 囲	20~250mmHg
表 示 最 小 値	1mmHg
脈 拍 測 定 範 囲	30~180拍/分
脈 拍 表 示 の 誤 差	±5%
表 示 方 式	液晶表示(128×64ドット)
排 気 調 節	自動排気調節
圧 力 リミッター	270mmHgにて瞬間排気
警 報 機 能	測定不能または加圧不能時
外 部 出 力 機 能	USB出力
使用環境温度/湿度	+10~+40℃/30~85%RH
保管環境温度/湿度	-5~+40℃/20~90%RH
医療機器認証番号	221AGBZX00109000
付 属 品	腕帯Mサイズ、ACアダプター、USBケーブル

*乾電池は同梱されておりませんので別途お買い求め願います。

外 寸 図

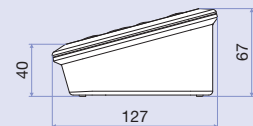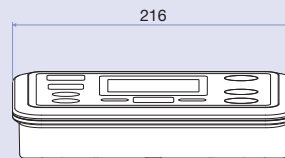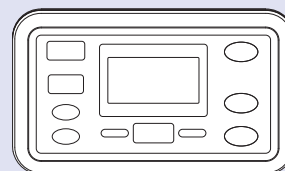

単位 (mm)

品 名	内容量 / 規 格	1 梱 入 数	商品コード	JANコード
医用電子血圧計 MIST-1000	—	1	45300	49-87696-45300-5
血圧データ収集ソフト	—	1	45301	49-87696-45301-2
MIST-1000用 腕帯Sサイズ	Sサイズ	1	45304	49-87696-45304-3
MIST-1000用 腕帯Mサイズ	Mサイズ	1	45305	49-87696-45305-0



安全にお使い
いただくために

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がりが上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店または当社にお尋ねください。
- このカタログは2009年8月現在のものです。

販売元

SARAYA サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

製造販売元

株式会社 パラマ・テック
〒813-0034
福岡市東区多の津1-7-5