



医療用

SARAYA Personal Protective Equipment

# サラヤ シールドマスク

マスク部は  
医療用マスクの米国規格  
ASTM-F2100-20  
適合



液体バリア

くもり止め加工

細菌・微粒子バリア

折り目加工

くもり止め加工済み  
シールドで  
クリアな視界を確保

折り目加工で  
両サイドからの  
飛沫を防御

形をつけやすく  
崩れにくい  
ノーズピース

ラテックスフリーで  
耳が痛くなりにくい  
平ゴム使用  
超音波溶着法でマス  
クとイヤーストラップを  
一体化

息苦しさがなく  
肌触りの良い不織布



米国規格 ASTM F2100-20 に適合した医療用マスクです。

細菌濾過効率: BFE (%)  $\geq 98$

微粒子濾過効率: PFE (%)  $\geq 98$

高性能フィルター内蔵による高い濾過効率

血液不浸透性: (mmHg) 120

体液・血液など湿性生体物質から口や鼻を守る液体バリア性

呼吸抵抗:  $\Delta P$  (mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>) <6

息苦しさのない適度な呼吸抵抗値

延焼性 CLASS 1

火気に対する安全性(燃え広がりにくさ)

※ 保管期間、保管状態により経時的に変化いたします。

湿性生体物質から目を守るアイシールドと  
鼻・口を守るサージカルマスクが  
一体になった製品です。  
これ一枚で目・鼻・口の粘膜を  
感染源から防御します。



### 外側・内側（スパンボンド不織布）

軽くて強度がある不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の湿性生体物質や細菌、微粒子の侵入を防ぎます。顔にふれても毛羽立たないすべすべした肌触りです。


### フィルター（メルトブロー不織布）

軽くてフィルター性能の高い極細繊維を使用しています。

1箱入数：25枚

1枚サイズ：W302mm × H175mm

素材：ポリエチレンテレフタレート（シールド）  
ポリプロピレン不織布（マスク部、フィルター）  
ポリエステル（イヤープント）  
アルミニウム板（ノーズピース）

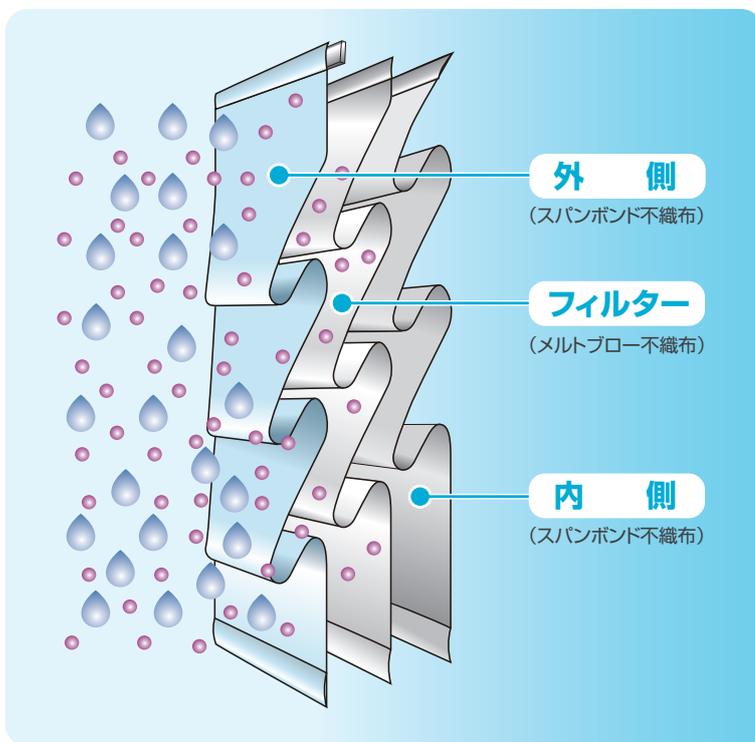

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	JANコード
サラヤシールドマスク	25枚入り / フリーサイズ	6	51108	49-87696-51108-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00～18:00)